


Baño de agua

WNB 7

La combinación de acero inoxidable resistente a la corrosión, un sistema electrónico de precisión y las múltiples medidas de protección contra valores excesivos o insuficientes de temperatura garantiza el mayor nivel de seguridad en el laboratorio.



En esta página encontrará todos los datos técnicos importantes sobre el baño de agua de Memmert. Si desea obtener más información, el departamento de ventas está a su entera disposición. En caso de necesitar una solución personalizada, envíe un correo electrónico a nuestros técnicos expertos a sales@memmert.com.

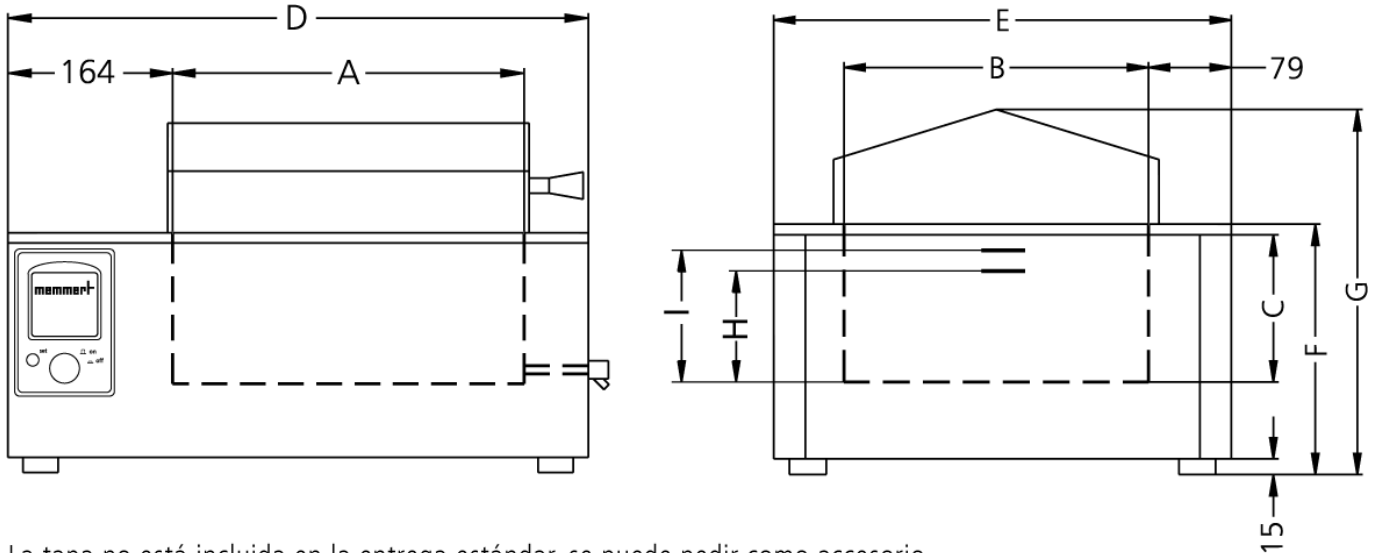

La tapa no está incluida en la entrega estándar, se puede pedir como accesorio.

Regulación de los componentes estándar

Sonda de temperatura 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos

Temporizador Reloj digital integrado con contador a partir de 1 min hasta 99,59 horas para: ENCENDER (funcionamiento continuo), ESPERAR (pospone un funcionamiento continuo o temporalmente limitado), DETENER

Temperatura

Rango de temperaturas ajustables +10 a +95 °C y nivel de ebullición adicional

Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos 5 por encima de la temperatura ambiente hasta +95 con nivel de cocción adicional

Técnica de regulación

Regulador Indicador digital de la temperatura nominal y real así como el tiempo (restante) del programa

Seguridad

Vigilancia de la temperatura Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 para interrupción del calentamiento a 30 °C por encima de la temperatura máxima del baño

Vigilancia de la temperatura En caso de errores relacionados con la temperatura excesiva se produce una interrupción del calentamiento a una distancia de cerca de 10 °C por encima del valor nominal

Sistema de autodiagnóstico Regulador de temperatura con microprocesador PID con sistema de autodiagnóstico integrado para una detección rápida de errores

Concepto de calentamiento

Calefacción baños Protección contra la corrosión, amplias áreas de calefacción ubicadas en 3 lados

Interior de acero inoxidable

Medidas $A_{(A)} \times A_{(C)} \times F_{(B)}$: 240 x 140 x 210 mm

Interior Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304), soldadura por láser

Volumen 7 l

Estado mínimo de llenado 97 mm

Estado máximo de llenado 120 mm

Carcasa de acero estructural

Medidas $A_{(D)} \times A_{(G)} \times F_{(E)}$: 468 x 337 x 356 mm

Datos eléctricos

Voltaje	230 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	aprox. 1200 W (en función de calentamiento)

Condiciones ambientales

Instalación	La separación respecto a todos los lados será como mínimo 80 mm. En la parte superior se deberá dejar un espacio libre de como mínimo 750 mm desde el canto superior del baño hasta la superficie próxima límite.
Temperatura ambiente	+5 °C a +40 °C
Humedad del aire (rh)	Máx. 80%, sin condensación
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2

Datos de embalaje/envío

Información de transporte	¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!
Número estadístico de mercancía	8419 8998
País de origen	República Federal de Alemania
N.º Reg. WEEE	DE 66812464
Medidas aprox. incl. cartón	An x Al x F 570 x 450 x 420 mm
Peso neto	aprox. 11 kg
Peso bruto cartón	aprox. 16 kg

Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras

