




Cámara para pruebas ambientales

CTC256

La cámara para pruebas ambientales de Memmert recrea los ambientes ideales y reduce la duración de los procesos gracias a los rápidos cambios de temperatura.



En esta página hemos recopilado todos los datos técnicos importantes sobre la cámara para pruebas climáticas CTC y la cámara para pruebas térmicas TTC. Si desea obtener más información, el departamento de ventas está a su entera disposición. En caso de necesitar una solución personalizada, envíe un correo electrónico a nuestros técnicos expertos a myAtmoSAFE@memmert.com.

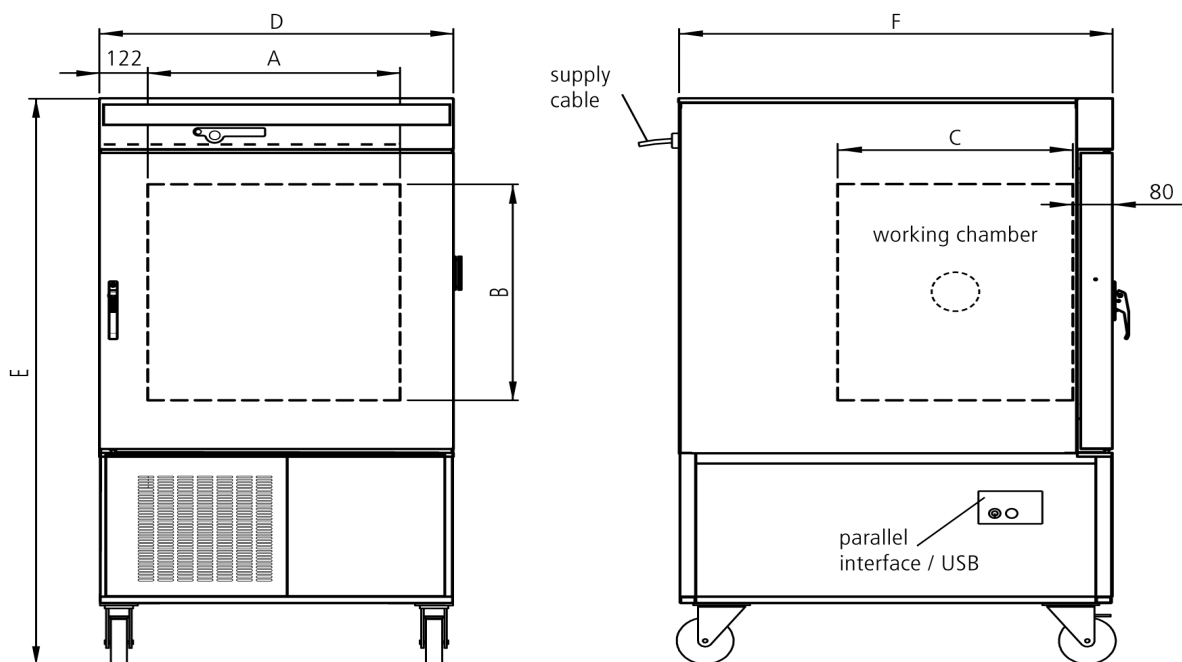

Humedad

Humedad	Humidificación mediante evaporador
Humedad	Humidificación y deshumidificación activa de 10-98 % rh con indicador digital de humedad relativa del aire: resolución del indicador 0,5 %, precisión de ajuste 1 %
Humedad	Suministro de humedad con agua destilada procedente de 2 depósitos x 10 l de extracción telescópica integrados en el equipo, con cambio automático
Humedad	2 x 10 l Recipientes colectores de producto de condensación, elemento de extracción telescópica

Temperatura

Gama de temperatura	sin humedad: de -42 °C hasta +190 °C
Gamma de temperatura	con humedad: de +10 °C hasta +95 °C
Fluctuaciones de temperatura espaciales	de +/- 0,5 hasta 2 K
Temperatura	2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales
Display	Valores digitales nominales prefijados (resolución 0,1 °C hasta 99,9 °C, 0,5 °C a partir de 100 °C) e indicador de valores reales (resolución 0,1 °C) de los valores de temperatura (LED)

Técnica de regulación

Regulador	Regulador de temperatura mediante microprocesador electrónico con sistema de autodiagnóstico
Regulador	Indicador digital de todos los valores de temperatura, días de la semana, hora, humedad, velocidad, segmentos de rampa y configuración de valores prefijados. Elección de idioma en Configuración
Temporizador	Temporizador con hora relativa para perfiles de regulación de temperatura. Se pueden configurar hasta 40 rampas, cada segmento de 1 min hasta 999 horas
Calibración	de tres valores de temperatura a elegir Dos puntos de calibración para la humedad: 20 y 90 % rh

Ventilación

Turbina de aire	extremadamente potente, regulable electrónicamente, en el interior
Turbina de aire	En función del estado de funcionamiento, adaptación automática del número de revoluciones y posibilidad de configuración de 10 a 100 %

Comunicación

Puerto	Puerto USB, incluido software «Celsius» para control y protocolización
Puerto	Puertos para impresora paralelos (incluido reloj de tiempo real con función de fecha) para todas las impresoras de inyección de tinta compatibles con PCL3 para documentación conforme a GLP
Protocolización de datos	Protocolización a largo plazo según GLP integrada (memoria circular) de todos los datos relevantes a modo de registrador de datos - 1024 kB
Protocolización de datos	Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico
Programación	Control de tarjetas chip, incluida 1 MEMoryCard XL con capacidad de almacenamiento de 32 kB (máx. 40 rampas)

Seguridad

Vigilancia de la temperatura	Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 10 °C por encima de la temperatura máxima del equipo
Vigilancia de la temperatura	Sistema de vigilancia de la temperatura (TWW), clase de protección 3.3 o limitador de temperatura (TWB), clase de protección 2, se puede configurar en el regulador
AutoSAFETY	Protección adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura e interrupción de la refrigeración en caso de temperatura insuficiente
Sistema de autodiagnóstico	para detección de errores de la regulación de la temperatura y de la humedad
Alarma	Alarma óptica y acústica en caso de temperatura excesiva/insuficiente y en caso de humedad insuficiente, aviso por puerta abierta y por depósito de agua vacío

Concepto de calentamiento

Abrazaderas calefactoras	Abrazaderas calefactoras de alto rendimiento con circulación de aire optimizada
Puerta con calefacción para evitar la condensación	
Refrigeración	Sistemas de refrigeración con 2 compresores

Equipamiento básico

Inserciones	1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s)
Certificado de calibración de fábrica	para +10 °C y +37 °C, 60 % rh a +30 °C
Puerta	Puerta de acero inoxidable completamente aislada y ajuste en 4 puntos, con calefacción
Interior	Mantenimiento sencillo, W. St. N.º 1.4301 (ASTM 304), soldadura hermética

Interior de acero inoxidable

Volumen	256 l
Medidas	$An_{(A)} \times Al_{(B)} \times F_{(C)}$: 640 x 670 x 597 mm
Nº máx. de inserciones	6
Carga máx. por inserción	25 kg

Carcasa de acero estructural

Instalación	Ruedas para desplazamientos con posibilidad de bloqueo
Medidas	$An_{(D)} \times Al_{(E)} \times F_{(F)}$: 898 x 1730 x 1100 mm
Carcasa	Pared trasera con chapa de acero galvanizada

Datos eléctricos

Potencia 400 V, 3 fases, 50/60 Hz/aprox. 7000 W

Condiciones ambientales

Instalación La distancia entre la cámara para pruebas y las paredes/techo debe ser como mínimo de 25 cm.

Temperatura ambiente 16 °C a 28 °C

Humedad del aire (rh) Máx. 70%, sin condensación

Altura de instalación Máx. 2000 m sobre el nivel del mar

Grado de contaminación 2

Datos de embalaje/envío

Información de transporte ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!

Número estadístico de mercancía 8419 8998

País de origen República Federal de Alemania

N.º Reg. WEEE DE 66812464

Medidas aprox. incl. cartón An x Al x F 1020 x 1910 x 1310 mm

Peso neto aprox. 337 kg


Peso bruto cartón aprox. 463 kg

Rango de temperatura-humedad de trabajo

CTC

No todas las cámaras climáticas son iguales. El contenido de humedad de la carga, las condiciones ambientales y el rango de temperatura-humedad de trabajo correspondiente determinan la correcta selección. En el diagrama al margen puede ver las posibles combinaciones de temperatura-humedad para nuestra cámara de clima constante CTC.

En el respectivo rango de temperatura-humedad las cámaras pueden funcionar de forma continua sin que se forme condensación. La medida en que pueda formarse condensación en las zonas límite dependerá del grado de humedad de la carga y de las condiciones ambientales.

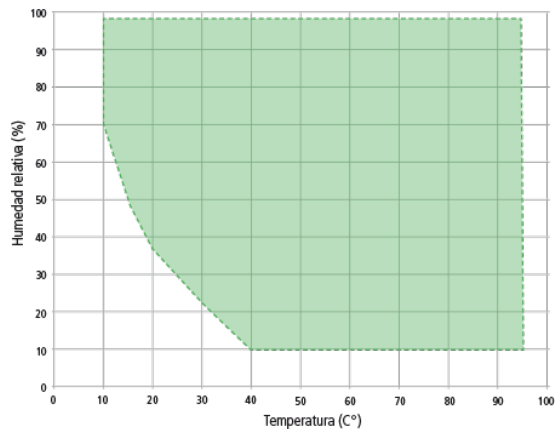

Rango de temperatura-humedad de trabajo CTC

Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras

