




Cámara para pruebas ambientales

TTC256

La cámara para pruebas ambientales de Memmert recrea los ambientes ideales y reduce la duración de los procesos gracias a los rápidos cambios de temperatura.



En esta página hemos recopilado todos los datos técnicos importantes sobre la cámara para pruebas climáticas CTC y la cámara para pruebas térmicas TTC. Si desea obtener más información, el departamento de ventas está a su entera disposición. En caso de necesitar una solución personalizada, envíe un correo electrónico a nuestros técnicos expertos a myAtmoSAFE@memmert.com.

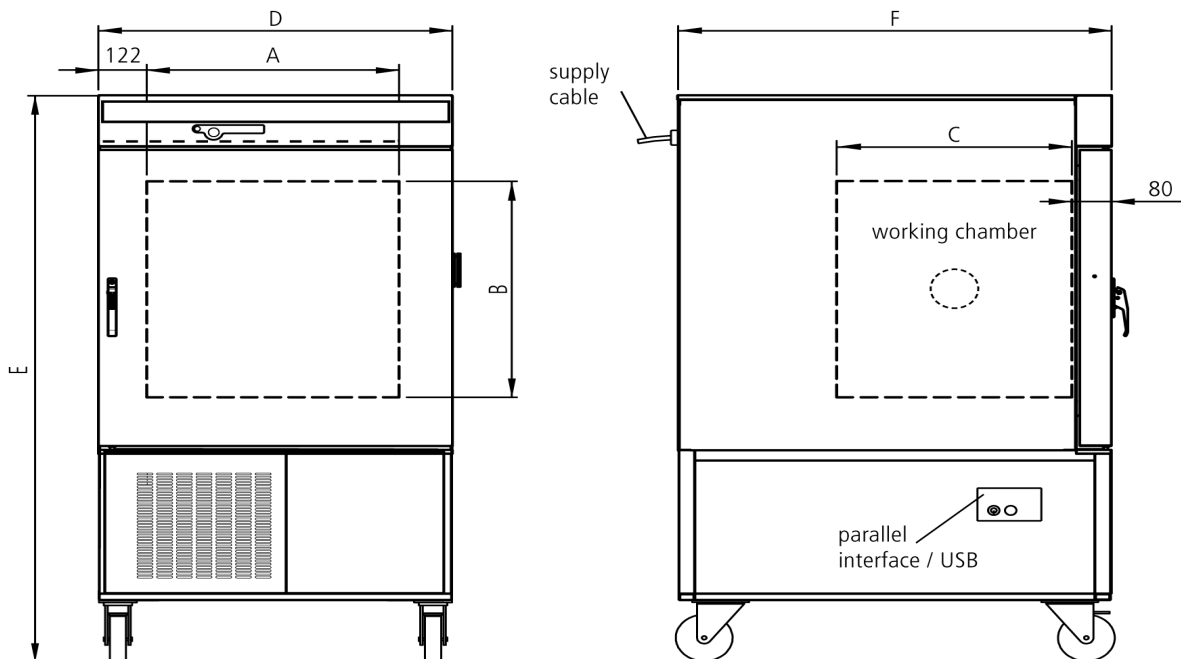

Humedad

Humedad	2 x 10 l Recipientes colectores de producto de condensación, elemento de extracción telescópica
---------	---

Temperatura

Gama de temperatura	sin humedad: de -42 °C hasta +190 °C
---------------------	--------------------------------------

Fluctuaciones de temperatura espaciales	de +/- 0,5 hasta 2 K
---	----------------------

Temperatura	2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales
-------------	---

Display	Valores digitales nominales prefijados (resolución 0,1 °C hasta 99,9 °C, 0,5 °C a partir de 100 °C) e indicador de valores reales (resolución 0,1 °C) de los valores de temperatura (LED)
---------	---

Técnica de regulación

Regulador	Regulador de temperatura mediante microprocesador electrónico con sistema de autodiagnóstico
-----------	--

Regulador	Indicador digital de todos los valores de temperatura, días de la semana, hora, velocidad, posición de la trampilla de extracción de aire, segmentos de las rampas y configuración de valores prefijados en Configuración. Elección de idioma en Configuración
-----------	--

Temporizador	Temporizador con hora relativa para perfiles de regulación de temperatura. Se pueden configurar hasta 40 rampas, cada segmento de 1 min hasta 999 horas
--------------	---

Calibración	de tres valores de temperatura a elegir Dos puntos de calibración para la humedad: 20 y 90 % rh
-------------	---

Ventilación

Turbina de aire	extremadamente potente, regulable electrónicamente, en el interior
-----------------	--

Turbina de aire	En función del estado de funcionamiento, adaptación automática del número de revoluciones y posibilidad de configuración de 10 a 100 %
-----------------	--

Comunicación

Puerto	Puerto USB, incluido software «Celsius» para control y protocolización
--------	--

Puerto	Puertos para impresora paralelos (incluido reloj de tiempo real con función de fecha) para todas las impresoras de inyección de tinta compatibles con PCL3 para documentación conforme a GLP
--------	--

Protocolización de datos	Protocolización a largo plazo según GLP integrada (memoria circular) de todos los datos relevantes a modo de registrador de datos - 1024 kB
--------------------------	---

Protocolización de datos	Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico
--------------------------	---

Programación	Control de tarjetas chip, incluida 1 MEMoryCard XL con capacidad de almacenamiento de 32 kB (máx. 40 rampas)
--------------	--

Seguridad

Vigilancia de la temperatura	Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 10 °C por encima de la temperatura máxima del equipo
Vigilancia de la temperatura	Sistema de vigilancia de la temperatura (TWW), clase de protección 3.3 o limitador de temperatura (TWB), clase de protección 2, se puede configurar en el regulador
AutoSAFETY	Protección adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura e interrupción de la refrigeración en caso de temperatura insuficiente
Sistema de autodiagnóstico	para la detección de fallos de regulación de temperatura
Alarma	Alarma óptica y acústica en caso de temperatura excesiva/insuficiente, aviso por puerta abierta

Concepto de calentamiento

Abrazaderas calefactoras Abrazaderas calefactoras de alto rendimiento con circulación de aire optimizada

Puerta con calefacción para evitar la condensación

Refrigeración Sistemas de refrigeración con 2 compresores

Equipamiento básico

Inserciones 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s)

Certificado de calibración de fábrica para +30°C u. 60 % rh

Puerta Puerta de acero inoxidable completamente aislada y ajuste en 4 puntos, con calefacción

Interior Mantenimiento sencillo, W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304), soldadura hermética

Interior de acero inoxidable

Volumen 256 l

Medidas $A_{(A)} \times A_{(B)} \times F_{(C)}$: 640 x 670 x 597 mm

N° máx. de inserciones 6

Carga máx. por inserción 25 kg

Carcasa de acero estructural

Instalación Ruedas para desplazamientos con posibilidad de bloqueo

Medidas $A_{(D)} \times A_{(E)} \times F_{(F)}$: 898 x 1730 x 1100 mm

Carcasa Pared trasera con chapa de acero galvanizada

Datos eléctricos

Potencia 400 V, 3 fases, 50/60 Hz/aprox. 7000 W

Datos de embalaje/envío/instalación

Instalación La distancia entre la cámara para pruebas y las paredes/techo debe ser como mínimo de 25 cm.

Información de transporte ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!

Número estadístico de mercancía 8419 8998

País de origen República Federal de Alemania

N.º Reg. WEEE DE 66812464

Medidas aprox. incl. cartón An x Al x F 1020 x 1910 x 1310 mm


Peso neto aprox. 337 kg

Peso bruto cartón aprox. 463 kg

Temperature-humidity working range CTC

Not all climate chambers are the same. The humidity content of the chamber load, the ambient conditions and the respective temperature-humidity working range are decisive factors in the selection of the right appliance. In the adjacent diagram, you can see the possible temperature/humidity combinations for our climatic test chamber CTC.

Within the respective temperature-humidity range, condensation-free permanent operation is possible. To which extent condensation may occur in the threshold range depends on the humidity content of the chamber load and the ambient conditions.

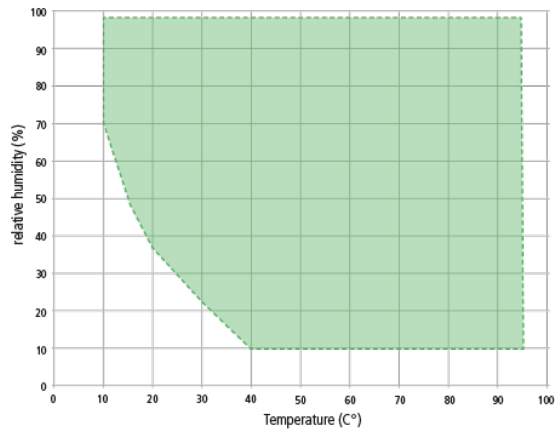

Temperature-humidity working range CTC

Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras

