

Kennzeichnung, Lager- und Transportbedingungen für Produkte der Memmert GmbH + Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma Memmert GmbH + Co. KG als Hersteller von Produkten und Medizinprodukten stellt seinen Händlern und Kunden die für ihn notwendigen Informationen für das Inverkehrbringen und Inbetriebnehmen gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden MDR genannt) zur Verfügung. Mit Auslieferung des Produktes stellt Ihnen die Firma Memmert GmbH + Co. KG die für Sie wichtigen Informationen auf den Produktkennzeichnungen zur Verfügung.

1. Lager- und Transportbedingungen

1.1 Lagerung und Transport

Das Gerät darf nur unter folgenden Bedingungen gelagert und transportiert werden:

- ▶ Trocken und in einem geschlossenen, staubfreien Raum
- ▶ Frostfrei
- ▶ Vom Stromnetz und der Gas- und Wasserversorgung getrennt

1.2 Zusatz für CO₂-Brutschränke

- ▶ Ventile der Gasflaschen schließen und Anschlüsse der Gasflaschen lösen
- ▶ Gasflaschen in geschlossenen, ausreichend belüfteten Räumen lagern
- ▶ Schlauchanschluss des Wasservorratsbehälters lösen
- ▶ Wasserbehälter entleeren

2. UDI Kennzeichnung der Verpackung der Medizinprodukte gemäß MDR nach Ablauf der Übergangsfristen

UDI-DI Wert	42518175 xxxxxx
UDI-DI Zuweisungsstelle	GS1 Germany GmbH Stolberger Straße 108a 50933 Köln
Stückzahl pro Verpackung	1
Status	Am Markt

3. Produktkennzeichnung

3.1 Typenschild

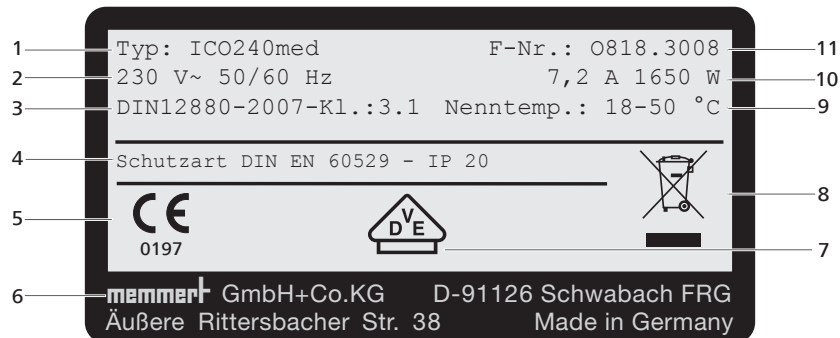


Abb. 1 Beispiel: ICO240med (Medizinprodukt)

1 Typbezeichnung	7 VDE-Prüfkennzeichen
2 Betriebsspannung	8 Entsorgungshinweis
3 Angewandte Prüfnorm und Schutzklasse	9 Temperaturbereich
4 Schutzart	10 Anschluss-/Leistungswerte
5 CE-Kennzeichnung mit Nummer der benannten Stelle	11 Seriennummer
6 Herstelleranschrift	

4. Verpackungskennzeichnung

4.1 Verpackung

- 1 Vor Nässe schützen
- 2 Zerbrechlich
- 3 Stapellimit
- 4 Vorsichtig transportieren
- 5 Richtung
- 6 Versandlabel (siehe 4.1.1.)

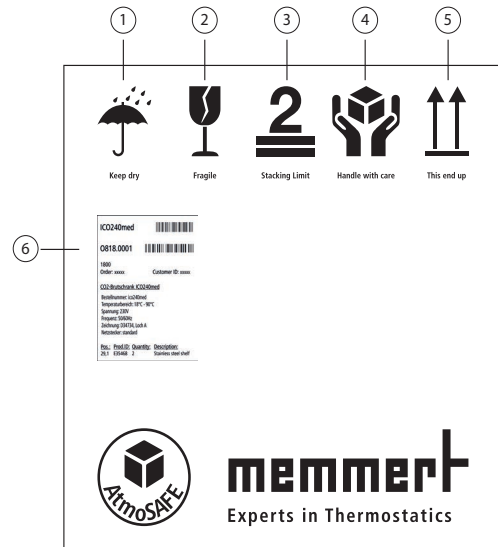


Abb. 2 Beispiel: ICO240med (Medizinprodukt)

4.1.1 Versandlabel

- 1 Typbezeichnung
- 2 Seriennummer
- 3 Bestell- und Kundennummer
- 4 Geräteausprägungen
- 5 Zubehör

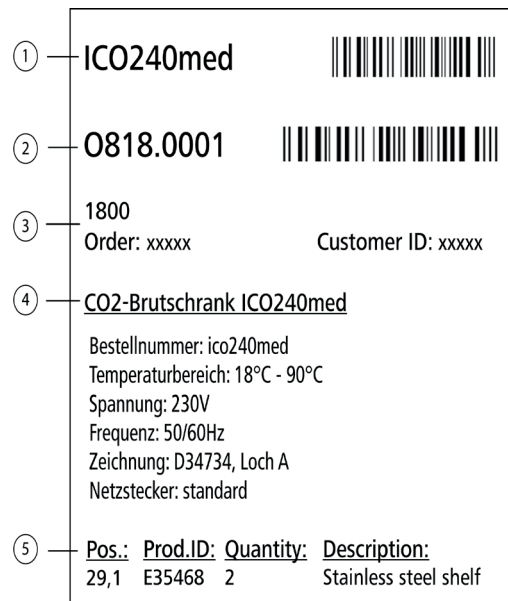


Abb. 3 Beispiel: ICO240med (Medizinprodukt)