


Bain d'huile

ONE 22

Sécurité absolue pour les laboratoires et les échantillons, même à des températures élevées grâce à une fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion, des composants électroniques de grande précision et un dispositif de protection thermique multiple.



Sur cette page, vous trouverez toutes les spécifications techniques principales du bain d'huile Memmert. Pour de plus amples informations, notre service de distribution se tient volontiers à votre disposition. Si vous avez besoin d'une solution spécifique individuelle, veuillez contacter nos spécialistes techniques à l'adresse sales@memmert.com.

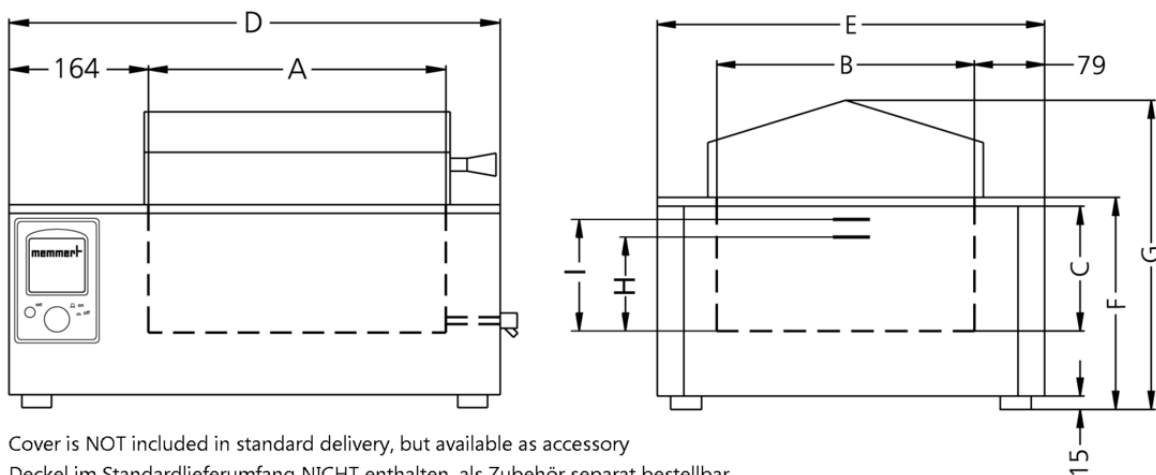

Contrôle des composants standard

Régulateur	Affichage numérique de tous les paramètres définis: valeurs de température et d'alarme (résolution de 0,1 °C), ainsi qu'intervalles
Horloge	Horloge numérique de 1 minute à 999 heures pour les modes suivants: MARCHE (fonctionnement continu), PAUSE (interruption) ARRÊT ou ARRÊT en fonction de la température de consigne avec «temps de maintien garant»
Étalonnage	sur le régulateur

Température

Gamme des températures réglables	+20 à +200 °C
Gamme des températures utiles	Au moins 5 au-dessus de la température ambiante jusqu'à 200 °C
Résolution d'affichage/Précision de réglage	0,1 °C jusqu'à +99,9 °C / 1 °C à partir de 100 °C

Sécurité

Sonde de température	2 thermosondes Pt100 DIN de classe A en technologie à 4 brins avec surveillance mutuelle et maintien du fonctionnement à une température exactement identique
Dispositif de sécurité thermique	Limiteur de température mécanique TB de classe de protection 1 pour coupure du chauffage à environ 30 °C au-dessus de la température maximale du bain
Dispositif de sécurité thermique	Dispositif de sécurité thermique électronique avec fonctionnement distinct (classe de protection 2)
Dispositif de sécurité thermique	En cas de surtempérature causée par une panne, le chauffage se coupe lorsque la température devient supérieure d'environ 10 °C à la valeur de consigne
Système autodiagnostic	Régulation PID par microprocesseur à émulation à logique floue et système autodiagnostic pour la détection instantanée des anomalies
Alarme	Alarme visuelle et sonore à la fin du programme, au moment de l'acquittement de la saisie, ainsi qu'en cas de niveau de remplissage trop faible, puis coupure automatique du chauffage

Concept de chauffage

Chauffage bains	Chauffage pour grande surface sur 3 côtés, protégé contre la corrosion
------------------------	--

Caisson intérieur en acier inoxydable

Mésures	$L_{(A)} \times L_{(B)} \times H_{(C)}$: 350 x 290 x 220 mm
Intérieur	Facile d'entretien, renforcé par la présence de rainures embouties, numéro de matériau 1.4301 (ASTM 304), soudure au laser
Volume	22 l
Niveau remplissage min.	177 mm
Niveau remplissage max.	200 mm

Caisson extérieur en acier inox structuré

Mésures $L_{(D)}$ x $H_{(G)}$ x $P_{(E)}$: 578 x 405 x 436 mm

Données électriques

Tension 230 V, 50/60 Hz

Charge électrique environ 2000 W (en mode chauffage)

Conditions d'environnement

Installation La distance au mur doit être d'au moins 100 mm sur les côtés et d'au moins 150 mm vers l'arrière. Au-dessus du bain, laisser au moins 750 mm d'espace libre (à partir du bord supérieur et jusqu'au dessous d'une étagère ou d'un plafond, par ex.).

Température ambiante +5 °C à +40 °C

Hygrométrie h.r. max. 80 %, non condensée

Classe de surtension II

Niveau de pollution 2

Données sur l'emballage/l'expédition

Information du transport Les appareils doivent être transportés en position verticale!

Tarif douanier commun 8419 8998

Pays d'origine Allemagne

Numéro d'enregistrement
DEEE DE 66812464

Dimensions env., carton
inclus Dimensions avec l'emballage (L x H x P): 670 x 530 x 460 mm

Poids net approximatif: 17 kg

Poids brut sous carton approximatif: 23 kg

Les unités standards ont reçu l'approbation de sécurité et contiennent les données de test

